

FATRI

医用红外线体温计

# 西人马红外额温枪

居家常备 健康好帮手



西人马联合测控（泉州）科技有限公司

Tel: 400 678 5081      Web: [www.fatritech.com](http://www.fatritech.com)

Add: 福建省泉州市洛江区双阳街道万虹路158号



FATRI官网



FATRI公众号

# 那些年我们用过的温度计



水银温度计

(读取时间久、易破碎且有毒)



电子温度计

(无体温存储)

VS



西人马红外额温枪

一秒  
读取

精准  
无误

体温  
存储

1秒非接触式测温

# 西人马红外额温枪



基本功能



背光灯显示



多种测温模式



可设定静音





避免交叉式感染

## 非接触式测温

西人马红外额温枪

无接触，保证了最好的卫生，  
从而大大减少被测者和操作者  
被细菌病毒传播的风险。

简单操作 感知温度的变化

# 测量高效又精准

- ✓ 非接触式红外测量
- ✓ 感应灵敏无需等
- ✓ 测量精准无误



用心做好每一步

# 优质红外线传感器

自主研发红外模组

测量值精确到 $0.2^{\circ}\text{C}$

测温稳定，快速准确

较强的环境温度适应性

5.5um 红外滤光片

宽测量温度范围



贴心无处不在

# 智能省电

支持自动关机

2节7号电池可连续使用3000次以上




15秒无操作自动关机



# 自主研发红外感应芯片与传感器

安装更匹配 测量更精准

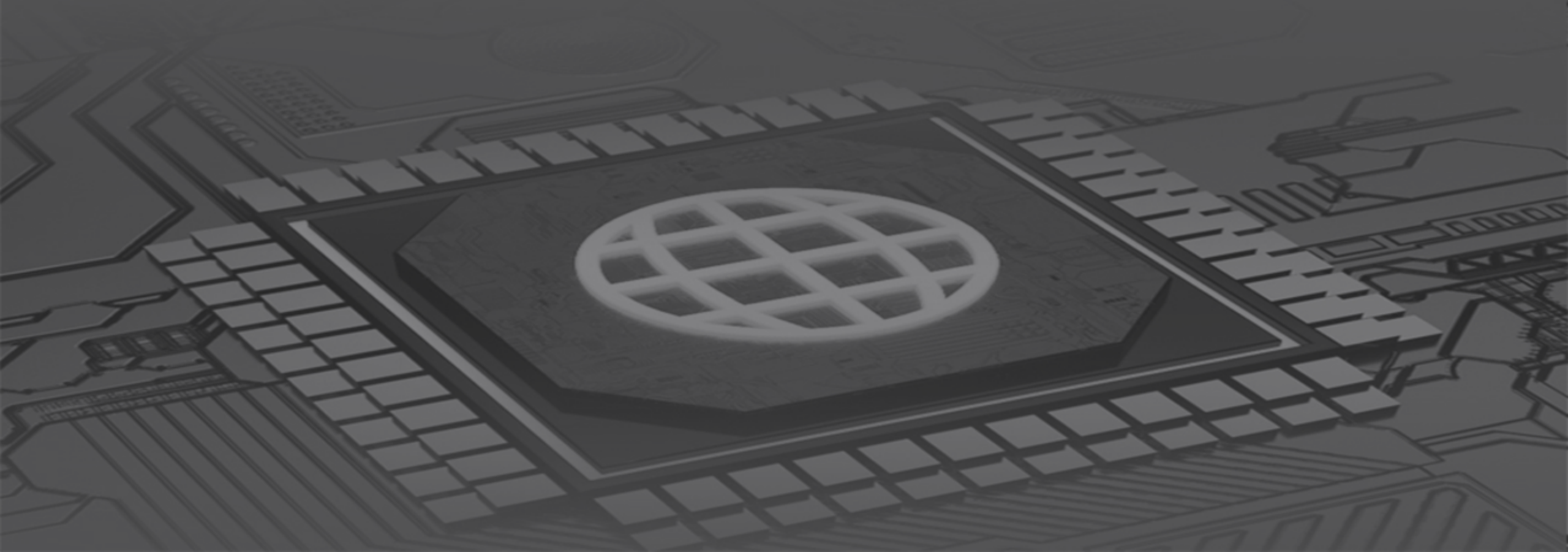




轻松夜间测温

# 温度异常报警

温度可以设置阈值报警

屏幕颜色显示及声音报警

夜光显示功能

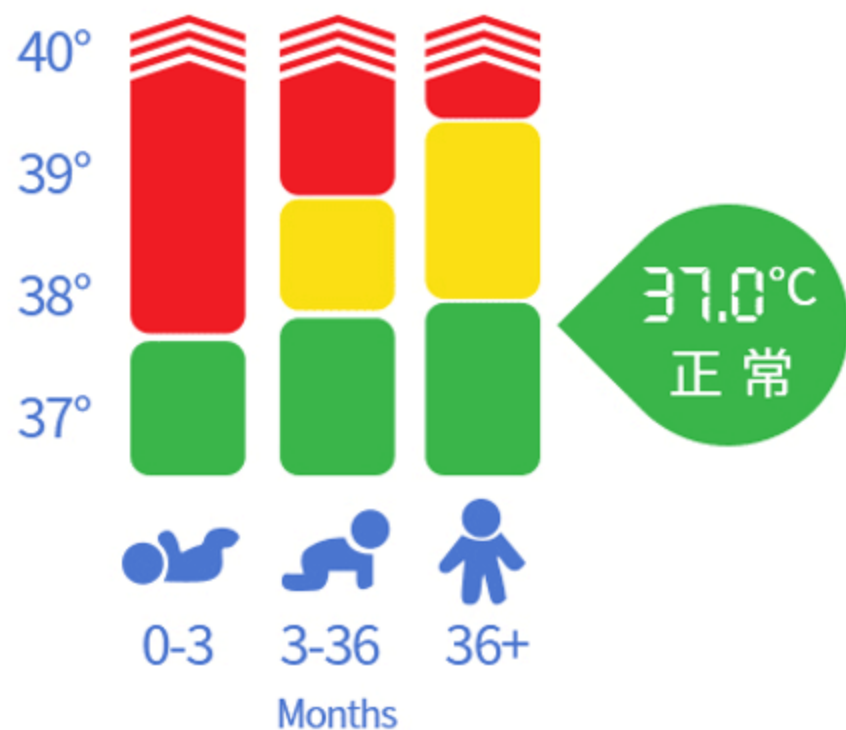


# 超多实用用途

靠近物体测量 数据更精准



# 测量方式

把额温枪置于前额2-5cm以内，  
根据绿色导向灯指引并对准，屏幕会显示一条水平线（“---”）。

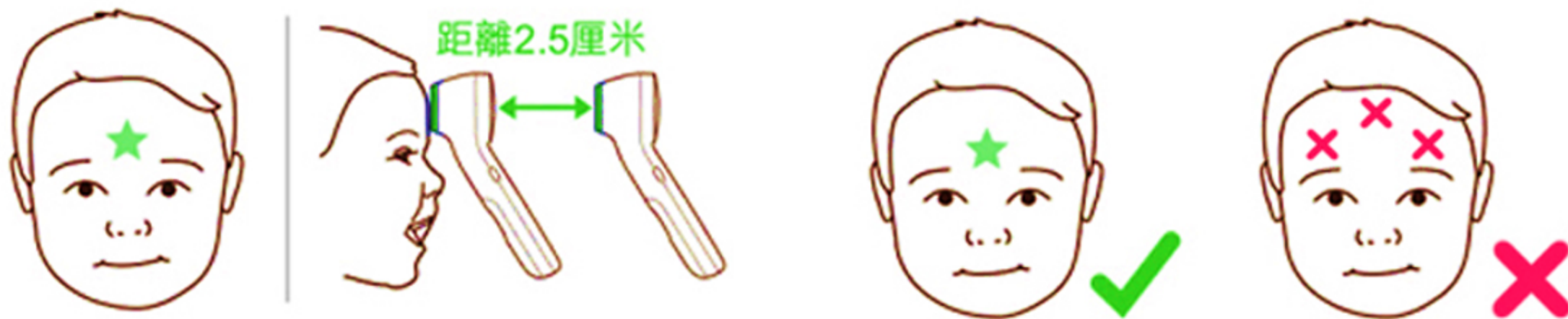

# 红外额温枪HM02G02

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 测量方式：   | 红外非接触                     |
| 测量距离：   | 2~5cm                     |
| 温度测温范围： | 32°C~42°C                 |
| 声音：     | 蜂鸣器，30分贝，开关控制             |
| 温度测量精度： | $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ |
| 存储：     | 存储关键数据                    |
| 低电量提醒：  | 屏幕上显示电量                   |
| 低功耗：    | 15s无操作自动关机                |
| 电池：     | 2节7号电池                    |





# 生产资质



医用红外额温枪注册证



医疗器械生产许可证